

# SB<sup>®</sup> 755 120



Panneaux **Susanne**/  
Barrières Britt V.

Plus grand, plus large...



Yes, you can.®

Le lit *Invacare SB755* est désormais disponible en largeur 120 cm, offrant plus de confort et davantage d'espace pour les personnes corpulentes (jusqu'à 200 kg), les aidant ainsi à se tourner.

Le lit *Invacare SB 755 120* a été conçu avec un système **de relève-buste à translation** de série pour un confort optimal.

Le lit *Invacare SB 755 120* aux lignes contemporaines et épurées épouse en toute harmonie chaque intérieur aussi bien à domicile qu'en collectivités. Les surfaces lisses du lit permettent le nettoyage et facilitent la désinfection.



Panneaux **Emma**/ Barrières Verso II.

### Confortable : pour les utilisateurs et pour le personnel soignant

Le lit *Invacare SB 755 120* a été conçu afin de limiter les effets de friction et de cisaillement grâce à une **position assise** - couchée par inclinaison à translation du relève-buste. Toujours en quête de nouvelles fonctionnalités, nous proposons de série sur la version 4 fonctions une **extension du plan de couchage** de 100 mm en tête + en pied de lit afin de correspondre aux besoins des personnes de grande taille.

### Démontable et transportable

La structure du lit a été conçue pour faciliter le transport et le stockage tout en pouvant le monter et le démonter facilement. Le lit est stocké sur un kit de transport et peut ainsi être acheminé depuis le camion de livraison jusqu'à la chambre de l'utilisateur. Les barrières **Verso II** et **Britt V** du lit *Invacare SB 755 120* sont conformes à la norme 60601-2-52. Freins indépendants, roues 100 mm.

## Caractéristiques et Options




Les lits **SB755 120** sont livrés sur un kit de transport.



**Relève-buste à translation de série** - fonctionnalité, confort lors du changement de position du buste, atténuant les effets de friction et de cisaillement.



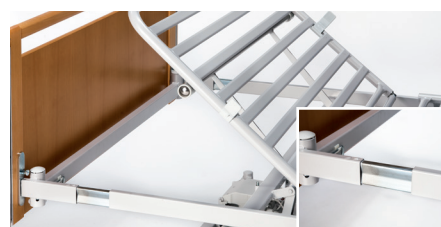


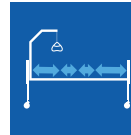




Dimensions du plan de couchage réalisées suite à des études anthropométriques afin d'optimiser le confort en station allongée.






Extension du plan de couchage : 100 mm en tête + en pied de lit pour s'adapter en fonction des besoins de chacun (version 4 fonctions électriques uniquement).

## Caractéristiques techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr). Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

Largeur hors tout / Largeur plan de couchage	Longueur hors tout / Longueur plan de couchage	Hauteur plan de couchage / Hauteur totale	Dimensions du plan de couchage	Garde au sol	Angle du Relève-buste	Angle plicature genoux	Angle négatif repose-jambe
 1300 mm / 1200 mm	 2130 mm / 2080 mm	 350 - 820 mm / 1600 - 2070 mm	 810 - 250 - 270 - 670 mm	 170 mm	 0 - 73°	 0 - 28° (4 fonctions électriques)	 0° - 16° (4 fonctions électriques)

Invacare **SB755 120**

Angle repose-jambes	Angle par rapport au plan de couchage	Poids patient max
 0° - 18° (4 fonctions électriques)	 25° au dessus / 14° en dessous (4 fonctions électriques)	 Charge de fonctionnement 235 kg / 200 kg

Invacare **SB755 120**



Adapté pour les personnes obèses



### Coloris Plan de couchage et Bois

Aluminium (RAL0154)	Hêtre	Merisier
		

Le lit ne doit pas être utilisé pour des patients dont l'âge est inférieur à 12 ans ou dont la taille est équivalente ou plus petite à celle d'une personne de moins de 12 ans.

CE Normes 60601-2-52 (lit et barrières)

